



El balance compacto de Dune ofrece una forma fácil y rápida para pesar, mediante un diseño optimizado y liviano. Con una operación simple de tres botones y una construcción robusta de plástico, Dune es una opción inteligente para usar en laboratorios, escuelas, cocinas, oficinas o instalaciones veterinarias. Los resultados se entregan en una extensa pantalla y la calibración automática se realiza mediante el teclado. Fácilmente portable, Dune puede ser alimentado por batería o adaptador de Corriente Alterna.

Diseño optimizado para el pesaje básico en el laboratorio, clase o campo




Características

- Gran pantalla de alto contraste, fácilmente visible
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Plato amplio, fácilmente removible para la limpieza rápida
- Función de auto apagado programable para ahorrar energía
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Funciona con adaptador AC (incluido) o baterías (no incluidas)

Aplicaciones

- Pesaje

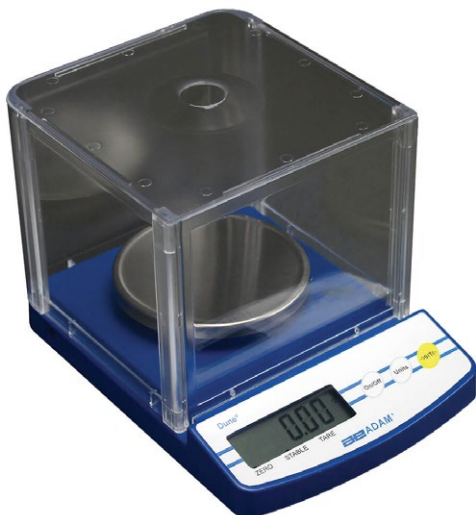

DCT 302

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	DCT 302	DCT 201	DCT 601	DCT 2001	DCT 2000	DCT 5000
Capacidad	300g	200g	600g	2000g	2000g	5000g
Legibilidad	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Repetibilidad (S.D.)	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Linealidad (+/-)	0.02g	0.2g	0.2g	0.2g	2g	4g
Tamaño del plato	100 ø	145x145mm				
Unidades de medida	g, oz			g, lb, oz		
Tiempo de estabilización (sec)	2					
Calibración	Calibración Externa					
Pantalla	LCD con dígitos 15mm de alto					
Alimentación de corriente	Adaptador 12VAC 50/60Hz 150mA / Pilas 6 x AA					
Temperatura de operación	0° a 40°C					
Carcasa	ABS					
Dimensiones totales	147x208x150mm (aprox)					
Peso Neto	0.5kg					

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700660290	Certificado de Calibración
700100012.....	F1 200g Pesa de Calibración
700100010	F1 2kg Pesa de Calibración
700100030	M1 2kg Pesa de Calibración
700100060	M1 500g Pesa de Calibración
700100072	M1 200g Pesa de Calibración

Suministrados por