




Les balances analytiques Equinox fournissent une précision remarquable aux laboratoires qui effectuent des tests extrêmement détaillés. L'Equinox est idéale pour les installations de recherche et d'assurance qualité; l'éducation scientifique; le compte de précision; et les applications de production et de manufacture qui nécessitent des résultats extrêmement précis. Un écran tactile en couleur fournit une opération intuitive, avec des menus basés sur des icônes et des fonctions et des applications facilement accessibles.

Une interface utilisateur intuitive pour les professionnels; conçue pour des applications avancées

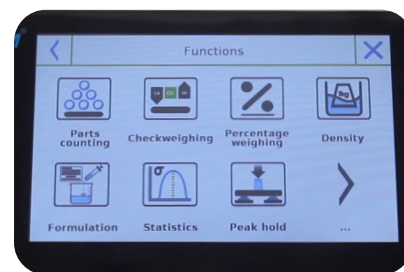

Caractéristiques

- Grand écran réactif tactile 5" 800x480 pixels
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire
- Adaptateur secteur inclus
- La mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- La mémoire accumule le total des résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Maintien de la valeur de crête
- Formulation
- Statistiques
- Textile

À Propos d'Adam Equipment:

Depuis plus de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit

Modèle	EAB 125i	EAB 225i	EAB 124i	EAB 224i	EAB 314i	EAB 414i	EAB 514i	EAB 124e	EAB 224e	EAB 314e
Capacité	62g / 120g	82g / 220g	120g	220g	310g	410g	510g	120g	220g	310g
Précision	0.01mg / 0.1mg	0.01mg / 0.1mg	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
Reproductibilité (S.D.)	0.03mg / 0.1mg	0.05mg / 0.1mg	0.0002g							
Linéarité (+/-)	0.08mg / 0.2mg	0.1mg / 0.2mg	0.0003g	0.0003g	0.0004g	0.0005g	0.0005g	0.0003g	0.0003g	0.0004g
Poids minimum	60mg / 200mg	100mg/200mg	400mg							
Taille du plateau	3.1" ø / 80mm ø									
Unités de pesage	g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, unité personnalisable									
Temps de stabilisation (sec.)	6		4							
Interface	RS-232, USB									
Calibrage	Interne automatique							Externe		
Affichage	Écran tactile avec des chiffres de 0.5" / 13mm de haut									
Alimentation	Adaptateur 24VDC 1A									
Température d'utili-sation	10° à 30°C / 50° à 86°F									
Boîtier	Plastique ABS									
Chambre de protection	Chambre 7.6"x7.7"x9.1" / 192x195x230mm									
Dim. totale	8.8"x14.7"x13.3" / 224 x 374 x 338mm									
Poids net	15.9lb / 7.2kg									

Accessoires

No. d'article.....	Description
104008036.....	Table Anti-Vibration TAV
1060014262	Ensemble de Densité
3012014259	Coque en Plastique
3074010267	Câble USB
3014011014.....	Câble RS-232
1120014641.....	Imprimante à Impact AIP
1129915779	Imprimante Thermique ATP2
3126011263	Papier pour ATP2
3126011281.....	Papier pour ATP2 (x10)
700100046.....	Serrure de Sécurité et Câble
600002028.....	Logiciel de Collecte de Données AdamDU
700660290.....	Certificat de Calibrage Usine
700100410.....	Ioniseur ABI-1
700100419.....	Coffret de Poids E1 1mg-50g
700100420.....	Coffret de Poids E1 1mg-100g
700100421.....	Coffret de Poids E1 1mg-200g
700100026.....	Coffret de Poids E2 1mg-200g
700100207	Coffret de Poids E2 1g-200g

Accessoires Principaux



Table Anti-Vibration TAV
La TAV fournit une surface solide et stable développée spécifiquement pour aider à réduire les vibrations pendant les mesures. la table permet à la balance de fonctionner avec une précision considérable malgré les courants d'air ou les mouvements qui pourraient causer des fluctuations dans les lectures.



Ioniseur ABI-1
L'ioniseur ABI-1 neutralise la charge statique qui s'accumule dans les matériaux non conducteurs comme le plastique, le verre, les céramiques, le papier et les textiles.

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis.
Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.