




Las balanzas analíticas Equinox brindan una precisión notable a los laboratorios que realizan pruebas muy detalladas. La serie Equinox es ideal para instalaciones de investigación y garantía de calidad, educación científica, conteo de precisión y aplicaciones de producción y fabricación que necesitan resultados excepcionalmente precisos. Su pantalla de visualización táctil proporciona un funcionamiento intuitivo, con menús de iconos impulsados y aplicaciones de fácil acceso.

***Diseñado para profesionales que necesitan aplicaciones avanzadas con una interfaz de usuario instintiva***

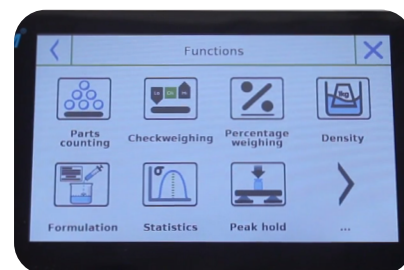

## Características

- Pantalla táctil grande y sensible de 5" y 800x480mm píxeles
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- USB host for memory card
- Adaptador de CA incluido
- Memoria incorporada para almacenar productos y ajustes
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Control de seguridad con contraseña evita el acceso no autorizado
- Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
- La función de tara predeterminada acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Recuento de piezas con tamaños de muestra libremente seleccionables
- Pantalla multilingüe permite el uso en diversas regiones del mundo
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Ranura de seguridad para candado opcional que ayudar a prevenir su robo

## Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Acumulación de Peso
- Determinación de la densidad
- Retención de pico
- Formulación
- Estadística
- Textil

### Sobre ADAM:

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Detalles de Producto

Modelo	EAB 125i	EAB 225i	EAB 124i	EAB 224i	EAB 314i	EAB 414i	EAB 514i	EAB 124e	EAB 224e	EAB 314e
Capacidad	62g / 120g	82g / 220g	120g	220g	310g	410g	510g	120g	220g	310g
Legibilidad	0.01mg / 0.1mg	0.01mg / 0.1mg	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
Repetibilidad (S.D.)	0.03mg / 0.1mg	0.05mg / 0.1mg	0.0002g							
Linealidad (+/-)	0.08mg / 0.2mg	0.1mg / 0.2mg	0.0003g	0.0003g	0.0004g	0.0005g	0.0005g	0.0003g	0.0003g	0.0004g
Peso Mínimo	60mg / 200mg	100mg / 200mg	400mg							
Tamaño del plato	3.1" ø / 80mm ø									
Unidades de medida	g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, unidad personalizada									
Tiempo de estabilización (seg)	6		4							
Interfaz	RS-232, USB									
Calibración	Interna Automática							Externa		
Pantalla	Pantalla táctil con dígitos de 0.5" / 13mm de alto									
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 1A									
Temperatura de operación	10° to 30°C / 50° to 86°F									
Carcasa	Plástico ABS									
Cabina	Cámara 7.6"x7.7"x9.1" / 192x195x230mm									
Dimensiones totales	8.8"x14.7"x13.3" / 224 x 374 x 338mm									
Peso Neto	15.9lb / 7.2kg									

Accesorios

No. de Artículo ....	Descripción
104008036.....	Mesa Antivibración AVT
700100410.....	Ionizador ABI-1
1060014262 .....	Juego de Densidad
3012014259.....	Cubierta de Protección
3074010267 .....	Cable USB
3014011014.....	Cable RS-232
1120014641.....	Impresora de impacto AIP
1120011156.....	Impresora Térmica ATP2
3126011263 .....	Papel para ATP2
3126011281.....	Papel para ATP2 (x10)
700100046.....	Candado y cable de seguridad de tipo Kensington
600002028.....	Programa del Recolección de Datos AdamDU
700660290.....	Certificado de Calibración
700100419 .....	Juego de Pesas E1 1mg-50g
700100420 .....	Juego de Pesas E1 1mg-100g
700100421.....	Juego de Pesas E1 1mg-200g
700100026.....	Juego de Pesas E2 1mg-200g
700100207 .....	Juego de Pesas E2 1g-200g

Accesorios Esenciales



**Mesa Antivibración AVT**  
la AVT ofrece una superficie sólida y estable, desarrollada específicamente para ayudar a disminuir la vibración durante la medición. Lo permite que la balanza desempeñe con notable precisión a pesar de las corrientes de aire o movimientos que podrían causar que las lecturas fluctúen.



**Ionizador ABI-1**  
El ionizador ABI-1 neutraliza la carga estática que se acumula en materiales no conductores tales como plástico, vidrio, cerámica, papel y textiles.